

AIA-900: Flexibilität & Anpassung



AIA-900

- ◆ Panel oder Einzelanalyse
- ◆ bis zu 5 unterschiedliche Teste pro Probe

Maße: B 890 / T 665 / H 642 mm, Gewicht: 122,5 kg

„auto mode“: Einsetzen der Proben
und AIA-PACKS & START drücken

AIA-900 + 9 tray sorter

- ◆ 180 Teste im Gerät
- ◆ bis zu 9 unterschiedliche Teste pro Probe

Maße: B 1290 / T 665 / H 642 mm, Gewicht: 163 kg

Einfacher Wechsel von „auto mode“ zu „sorter mode“



AIA-900 + 19 tray sorter

- ◆ 380 Teste im Gerät
- ◆ bis zu 19 unterschiedliche Teste pro Probe

Maße: B 1520 / T 665 / H 1247 mm, Gewicht: 273 kg

Voll automatisiert im „sorter mode“



EC REP

TOSOH EUROPE N.V.

Transportstraat 4
3980 Tessenderlo
BELGIUM
Tel : +32 (0)13 66 88 30
Fax : +32 (0)13 66 47 49



TOSOH CORPORATION BIOSCIENCE DIVISION

Shiba-Koen First Bldg.
3-8-2, Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-8623 - JAPAN
Tel : +81-3-5427-5181
Fax : +81-3-5427-5220

TOSOH EUROPE N.V.

Kufurstendamm 21
D-10719 Berlin
GERMANY
Tel: +49 30 887 06 220 7
Fax: +49 30 887 06 120 0

TOSOH BIOSCIENCE A.G.

Fanghöfli 8
6014 Luzern
SWITZERLAND
Tel: +41 (0)41 250 44 80
Fax: +41 (0)41 250 50 64



TOSOH Dedicated to earn your trust.


www.tosohbioscience.eu



TOSOH Dedicated to earn your trust.

„...Der AIA-900 ist die neue Generation
eines Immunoassay-Standgerätes:
flexibel und vollkommen anpassungsfähig
an meine Bedürfnisse...“

AIA900_TRLDE_0811 - www.designbysign.com

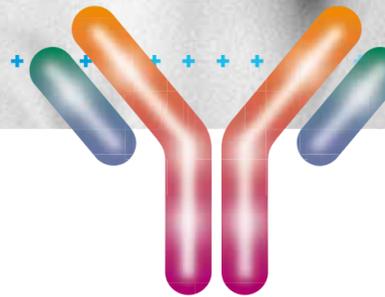

AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYSER

AIA-900.

AIA-PACK. Ein einzigartiges Konzept.

- Lyophilisierte Reagenzien sorgen für lange* Haltbarkeit des AIA-PACK.
- 90 Tage Kalibrierungsstabilität.
- Die meisten Analysen brauchen 10 Minuten Inkubationszeit und liefern das erste Ergebnis innerhalb von 20 Minuten.
- Kein Kontaminations oder Übertragungsrisiko zwischen Proben und Reagenzien
 - 1 AIA-PACK = 1 Test
 - Die gesamte Analyse (Inkubation, Waschen und Nachweis) wird im AIA-PACK ausgeführt
- Einwegpipettenspitzen für Proben und Reagenzien
- Der einzelne Becher pro Test verbunden mit einer geringen Reagenz-Verbrauchsmenge spiegelt Tosohs Umweltbewusstsein wider

* 12 Monate nach Herstellung

Ein gebrauchsfertiger "all-in-one" Testbecher

ALUMINIUMVERSCHLUSS

MAGNETISCHE UND MIT IMMOBILISIERTEN ANTIKÖRPERN/ANTIGENEN ÜBERZOGENE KUGELN

LYOPHILISERTES KONJUGAT

